

Cómo detectar medetomidina en sus drogas

con las tiras reactivas
BTNX Rapid Response™

Las tiras reactivas son una herramienta útil, pero no perfecta. Los resultados pueden variar según la sustancia que se analice y el método utilizado. Es decir que los resultados no siempre serán precisos o confiables.

Estas instrucciones ofrecen una guía rápida de cómo usar las tiras reactivas BTNX Rapid Response™. Están diseñadas para mostrarle los pasos principales. Para instrucciones completas y detalladas, visite las indicaciones oficiales del fabricante aquí: btnx.com/category/harm-reduction



Salvando Vidas
OREGON

SalvandoVidasOregon.org

1 Prepare la droga

Triture y mezcle. Mida 10 mg de polvo en una bolsita o recipiente pequeño como un taparrosca.


10 mg ≈ tamaño de un grano de arroz o una micro cuchara



2 Agregue agua

Agregue como 5 ml/cc de agua limpia a una bolsita, recipiente o calentador. Mezcle bien.


5 ml/cc de agua ≈
1 taparrosca o cucharadita

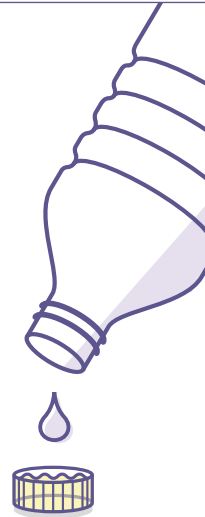

3 Sumerja la tira 15 segundos

Sujete la tira por el extremo de color. Sumerja el otro extremo en la mezcla por 15 segundos.

No pase más allá de las líneas onduladas.

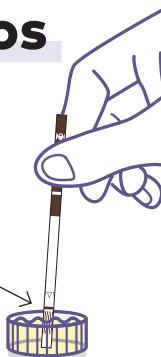

4 Espere 2-5 minutos

Ponga la tira reactiva en una superficie plana. Espere 2-5 minutos para ver el resultado. Si lee los resultados después de 10 minutos, podrían estar incorrectos.



5 Lea el resultado



1 línea roja = POSITIVO

Podría contener medetomidina.

Nota: Un resultado positivo no indica la cantidad de medetomidina.



2 líneas rojas = NEGATIVO

Fíjese bien, ¡la segunda línea puede verse borrosa!

Nota: Un resultado negativo no significa necesariamente que la muestra o todo el suministro esté libre de medetomidina.

Si solo hay una línea roja a la izquierda o ninguna línea, la prueba es inválida. Repita con una nueva tira.

Precaución

Las tiras reactivas no son perfectas. No indican la potencia de una sustancia, qué más podría contener o si es segura.

Pasos para reducir su riesgo

Aún si el resultado de la prueba es negativo, todavía hay peligro de sobredosis. Tome los pasos necesarios para reducir su riesgo.

- **Analice sus drogas.**
- **Lleve naloxona.**
- **Pida ayuda si usa drogas solo.**



¿Qué es medetomidina?

La medetomidina es un fuerte sedante. No es un opiode.

Puede hacer más lenta la respiración y el ritmo cardíaco, y provocar una sobredosis. Puede estar mezclada con fentanilo y otras drogas.

Salvando Vidas
OREGON

SalvandoVidasOregon.org

02/09/26

Siempre tenga naloxona a la mano

La naloxona puede revertir sobredosis por opioides. No ayuda con la medetomidina, pero las drogas pueden estar mezcladas. Siempre administre naloxona en caso de sobredosis.

Use menos y poco a poco

Las sobredosis pueden ocurrir de repente. Espacie sus dosis.

Considere opciones en vez de inyectarse

Inhalar o fumar tiene menor riesgo de sobredosis que el inyectarse.

Use drogas en turnos

Asegúrese que la otra persona esté alerta y tenga naloxona a la mano.

Analice sus drogas cada vez

Siempre analice sus drogas aún si las compra de la misma persona o bolsa.

Pida ayuda si usa drogas solo

Llame a un amigo o use un servicio como **SafeSpot Hotline** al 1-800-972-0590.

Escanee para agregar SafeSpot a su lista de contactos.



Qué debe saber sobre las tiras reactivas

Las tiras reactivas para detectar medetomidina son útiles, pero NO son perfectas.

- Los resultados no son siempre exactos. Pueden dar falsos positivos o falsos negativos.
- Las tiras reactivas de medetomidina solo detectan medetomidina. No detectan otras drogas como el fentanilo. Su suministro puede contener otras sustancias.

- Las tiras reactivas no indican la cantidad ni la potencia.
- Un resultado negativo no significa que su suministro sea seguro.
- Que una porción del suministro haya salido negativa no significa que el resto de sus drogas estén libres de medetomidina.